





Ionte-escaliers courbe Platinum très simple d'utilisation.






Asseyez vous sur cette chaise révolutionnaire Ergo qui peut être réglée afin de vous garantir le meilleur confort lors de son utilisation.



Pour Utiliser le monte-escalier il vous suffit de presser la manette située au bout de l'accoudoir dans le sens où vous désirez aller.

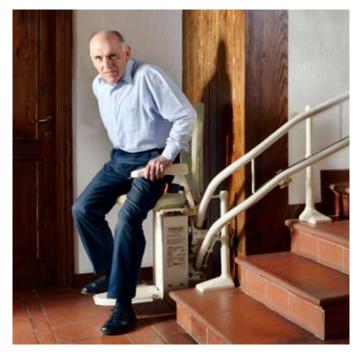





En haut, vous pouvez faire pivoter la chaise pour vous permettre de vous relever facilement et en toute sécurité.



Lorsqu'il n'est pas utilisé, le monte-escaliers peut être stationné dans l'escalier afin de laisser la place aux autres membres de la famille.





Monte-escaliers Platinum Horizon simple d'utilisation.





Asseyez vous sur cette chaise révolutionnaire Ergo qui peut être réglée afin de vous garantir le meilleur confort lors de son utilisation.



Pour Utiliser le monte-escalier il vous suffit de presser la manette située au bout de l'accoudoir dans le sens où vous désirez aller.








En haut, vous pouvez faire pivoter la chaise pour vous permettre de vous relever facilement et en toute sécurité.




Lorsqu'il n'est pas utilisé, le monteescaliers peut être stationné dans l'escalier afin de laisser la place aux autres membres de la famille.

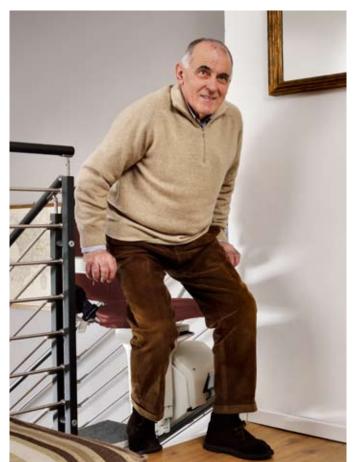




Découvrez les caractéristiques uniques

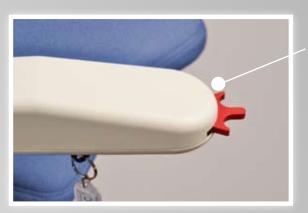

Manette ergonomique Peut être utilisée comme un boutton

et permet l'utilisation de ce monteescaliers dans une position confortable et naturelle même pour les personnes à mobilité réduite.

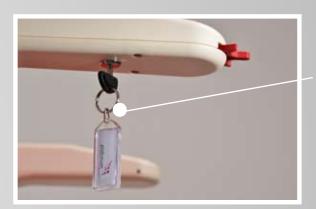

Commutateur de clé de sécurité

Situé sous l'accoudoir pour prévenir une utilisation non autorisée.



Levier pivotant du siègé

Pour pivoter en haut de l'escalier il vous suffit de soulever la manette. Il existe également en option la version motorisée qui est différente de la commande ergonomique.



ERGO plus seat

Conçu pour optimiser la position des jambes lorsque vous êtes assis.

Affichage de diagnostique Numérique

Intégré dans l'accoudoir, il vous communique toutes les informations et le diagnostique de votre monteescaliers en temps réel.

Ceinture de sécurité rétractable à enrouleur

Pour fournir une sécurité supplémentaire et se déplacer en toute sécurité.

Levier indépendant relié au repose-pieds

Pour déplier et replier le repose-pieds facilement quand vous en avez besoin sans avoir à vous baisser (en option, peut être motirisé). Permet également l'installation facile pour les personnes en fauteuil roulant.

Sécurité avec bords sensibles

Ceux-ci arrêtent automatiquement le monteescalier en cas d'obstructions sur l'escalier pendant le transport.

HD Classic seat

Une option unique pour le PLATINUM CURVE destiné à un utilisateur de poids allant jusqu'à 160Kg.










Un produit sur mesure qui s'adapte à vos besoins.




Appréciez l'ERGO Siège entièrement réglable.





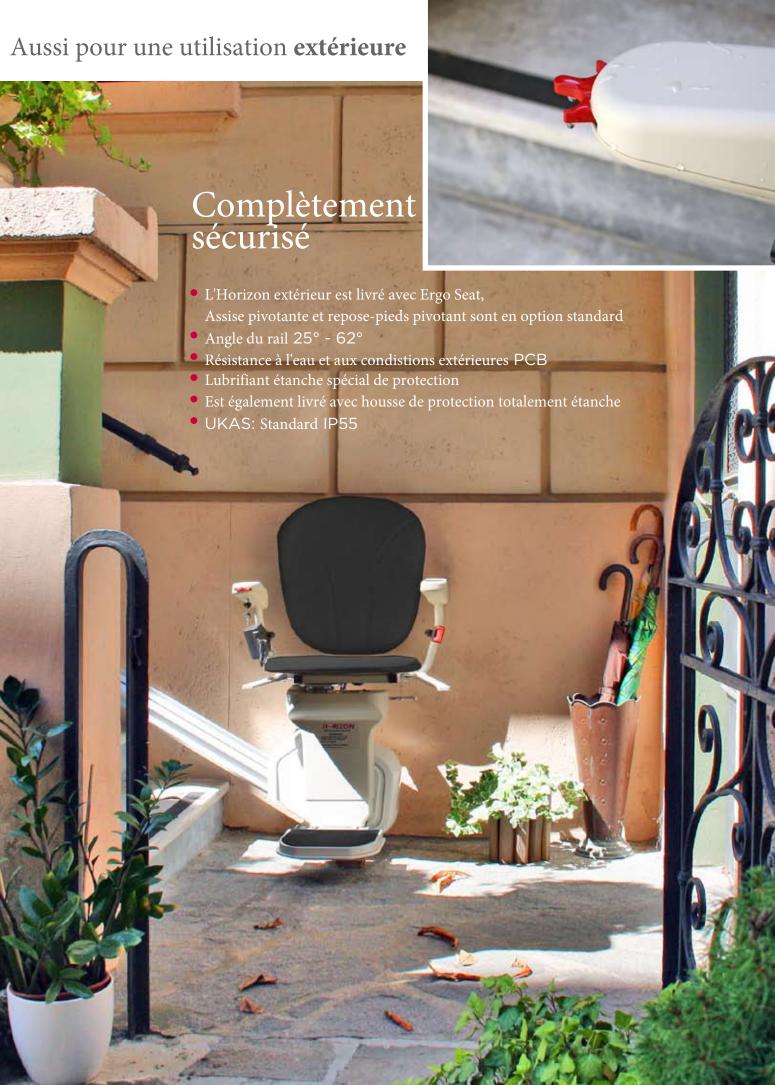

Courbe ou Droit,

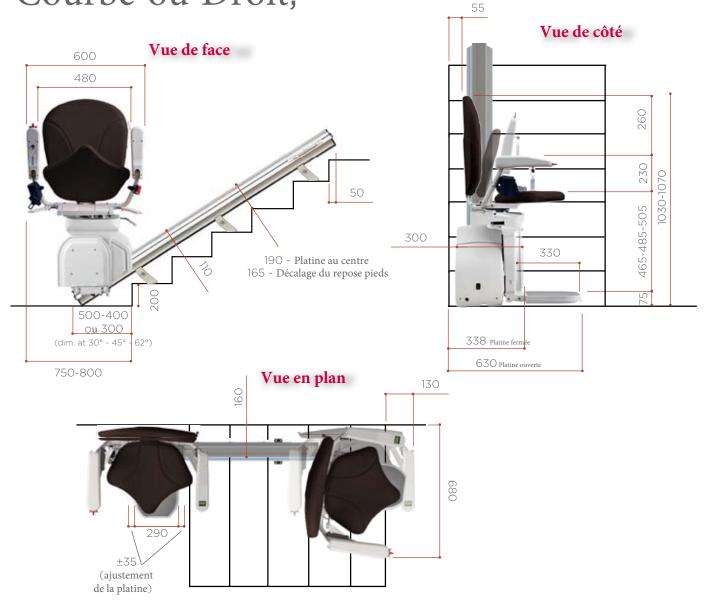


Batteries, 2 x 12 volt. Consommation 0,014 kWh
110 V / 220 V 27 V amp / 1.1 amp
0,12 m/sec.
Avec des plaques de charge interne au niveau des extrémités du rail
Rail unique en aluminium
Fixé sur des supports de montage téléscopiques
A pignon et crémaillère avec contrôle de l'OSG
Mémoire interne et rapport de diagnostique placés dans l'accoudoir
25 - 62°max
Alimentation par batteries, 0,26kw
24 mois
140 kg



Cette chaise est toujours ERGO.



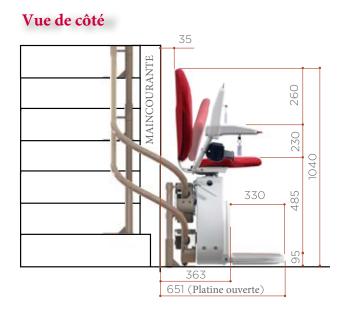



Les mesures, en millimètres, sont des valeurs nominales. Les caractéristiques peuvent varier en fonction de la configuration de l'escalier. Les instructions d'utilisation sont fournies avec chaque système.

Source de courant	Batteries, 2 x 12 volt. Consommation 0,014 kWh
Charge	110 V / 220 V 27 V amp / 1.1 amp
Vitesse	0,12 m/sec. Réglable électriquement
Câblage	Avec des plaques de charge interne au niveau des extrémités du rail
Fabrication	Tubes 2 en acier, diamètre de 38mm et rayon de courbure de 200 mm
Fixation	Fixé sur des supports de montage téléscopiques
Type d'entraînement	A pignon et crémaillère avec contrôle de l'OSG
Diagnostique	Mémoire interne et rapport de diagnostique placés dans l'accoudoir
Inclinaison	0 - 52° max
Moteur	Alimentation par batteries 0,26kw
Garantie	24 mois
Capacité	120 kg (160 kg possible sur le modèle HD)

